


Irrigador bucal inalámbrico

Modelo: EWF-32

Manual del usuario

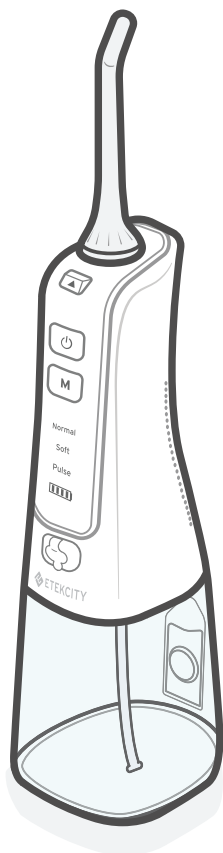

Gracias por adquirir el **irrigador bucal inalámbrico** de Etekcity.

En caso de preguntas o dudas, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en **support.eu@etekcity.com**. Esperamos que disfrute de su nuevo irrigador bucal inalámbrico.

Índice

Contenido de la caja	3	Mantenimiento	9
Especificaciones	3	• Cargar la batería	9
Precauciones importantes	4	• Limpiar el irrigador bucal	9
Diagrama de funciones	6	• Limpiar el depósito, el tubo y el filtro de agua	10
Controles	7	• Cambiar la boquilla	11
Usar el irrigador bucal	7	• Almacenamiento	11
		Resolución de problemas	12
		Información sobre la garantía	13
		Atención al Cliente	13

Contenido de la caja

1 irrigador bucal inalámbrico
1 depósito de agua (preinstalado)
4 boquillas estándar
1 cable de carga
1 manual del usuario

Especificaciones

Entrada	USB 5 V, 1 A
Tipo de batería	Batería de ión-litio de 1400 mAh
Tiempo de carga	4 horas
Capacidad del depósito de agua	300 ml/10,1 oz
Frecuencia de Pulse (impulsión) del agua	1400-1800 veces/min
Presión del agua	276-724 kPa/40-105 psi
Dimensiones	7,3 x 8,2 x 30,2 cm (2,9 x 3,2 x 11,9 in)
Peso	0,3 kg (0,7 lb)
Apagado automático	2 minutos

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar productos eléctricos, especialmente en presencia de menores, se deben llevar a cabo **siempre** estas precauciones de seguridad básicas:

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PELIGRO: para reducir el riesgo de electrocución durante la carga:

- **No** toque el cable de carga con las manos mojadas.
- **No** sumerja ni introduzca el cable de carga ni el irrigador bucal en agua ni en ningún otro líquido mientras se carga.
- **No** lo utilice mientras se baña.
- **No** coloque ni guarde el irrigador bucal en lugares donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera, plato de ducha o lavabo.
- **No** coja el irrigador bucal si se ha caído al agua. Desenchufe el cable de carga de inmediato si está enchufado.
- Compruebe si el cable de carga está dañado antes de usarlo. No use **nunca** un cable de carga dañado para cargar el irrigador bucal.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas:


- **No** enchufe el cable de carga en un sistema eléctrico diferente al especificado en **Especificaciones** (consulte la página 3).
- **No** utilice este irrigador bucal si el cable o el enchufe están dañados y no funcionan correctamente. Póngase en contacto con **Atención al cliente** (consulte la página 13).
- **No** dirija el chorro de agua a la zona situada debajo de la lengua ni al oído, nariz u otras zonas delicadas. Este irrigador bucal puede generar presiones que pueden provocar daños graves en estas zonas.

- Utilice el irrigador bucal **solo** según se indica en estas instrucciones y siguiendo las recomendaciones de su dentista.
- Dependiendo del estado de sus encías, es posible que estas sangren las primeras veces que utilice el irrigador bucal. Esto suele ocurrir al limpiarse con cualquier irrigador. Si el sangrado es muy abundante o no se interrumpe en dos semanas, consulte con un dentista.
- Llene el depósito de agua o de otras soluciones recomendadas **solo** por dentistas profesionales.
- **No** deje caer ni introduzca ningún objeto extraño por ninguna de las aperturas del irrigador bucal.
- Mantenga el cable de carga y el irrigador bucal alejados de superficies calientes.
- **No** utilice el aparato en entornos donde se estén usando espráis de aerosoles u oxígeno.
- **No** utilice colutorios u enjuagues bucales que contengan yodo, blanqueadores o aceites esenciales con el irrigador bucal.
- **No** utilice el irrigador bucal si lleva algún tipo de piercing en la boca. Quíteselo antes de usar el irrigador.
- **No** utilice el aparato si tiene alguna herida abierta en la lengua o en la boca.
- Si su médico le ha recetado un tratamiento con antibióticos antes de llevar a cabo cualquier intervención dental, le recomendamos que consulte con su médico antes de usar el irrigador bucal o cualquier otro dispositivo de higiene oral.
- Supervise atentamente el irrigador bucal si lo usan niños o personas minusválidas o discapacitadas.
- **No** permita que los niños jueguen con el irrigador bucal.
- Utilice **solo** el cable de carga proporcionado para cargar la batería.
- Este irrigador bucal contiene baterías que no se pueden sustituir.
- No diseñado para uso comercial, sino para uso **exclusivamente** doméstico.

**GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES**

Diagrama de funciones

- A. Boquilla
- B. Orificio de la boquilla
- C. Botón para soltar la boquilla
- D. Botón de encendido/apagado
- E. Botón de selección de modo
- F. Normal (normal)
- G. Soft (suave)
- H. Pulse (impulsión)
- I. Indicador del nivel de la batería
- J. Conexión del puerto
- K. Toma de carga
- L. Mango antideslizante
- M. Filtro de agua
- N. Tubo de agua
- O. Cable de carga
- P. Depósito de agua
- Q. Tapa del depósito de agua

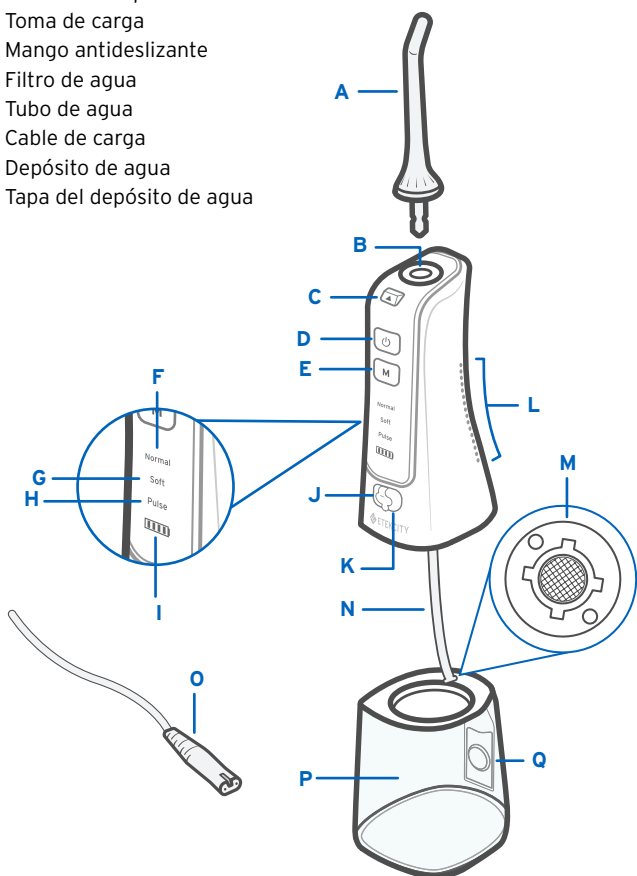

Controles

▲ : Separa la boquilla del irrigador bucal.

⏻ : Enciende o apaga el irrigador bucal.

M : Permite cambiar entre los modos Normal (normal), Soft (suave) y Pulse (impulsión). Puede cambiar de modo en cualquier momento, incluso cuando el irrigador bucal esté apagado.

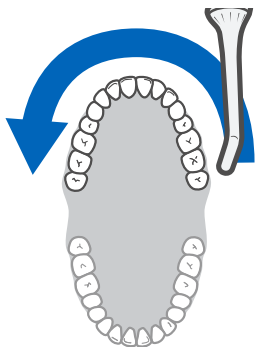


Figura 1.1


Usar el irrigador bucal

Nota:

- Antes de usar el irrigador bucal por primera vez, cárguelo por completo (consulte **Cargar la batería**, página 9).
- Utilice el modo Soft (suave) durante las dos primeras semanas para que sus encías se acostumbren al irrigador bucal. Si el sangrado no se interrumpe en dos semanas, consulte con un dentista.

1. Introduzca la boquilla firmemente en el orificio correspondiente. Oirá un "clic" cuando la encaje correctamente.
2. Asegúrese de que el irrigador bucal esté apagado y de que la conexión del puerto cubra el puerto de carga. Abra la tapa del depósito de agua y llene el tanque de agua del grifo. Presione la tapa firmemente para cerrarla.
3. Pulse **M** para seleccionar el modo de presión del agua.
4. Coloque la boquilla en la línea de las encías de sus dientes traseros y cierre la boca para evitar que salpique agua. Sobre un lavabo, mantenga pulsado ⏻ durante un segundo para encender el irrigador bucal (figura 1.1). Deje que caiga el agua por el lavabo.

Usar el irrigador bucal (cont.)

5. Deslice el chorro de agua por la parte exterior de sus encías. Haga pausas entre diente y diente para quitar la placa y restos de comida (figura 1.2).
6. Repita el procedimiento por la parte interna de las encías, hasta que todos los dientes estén limpios (figura 1.3).
7. Pulse  para apagar el irrigador bucal.

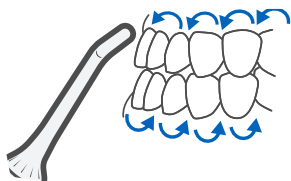


Figura 1.2

Nota:

- La boquilla se puede girar 360° para ajustar la dirección del chorro de agua.
- Puede cambiar entre los tres modos de presión de agua en cualquier momento.
- El irrigador bucal se apagará automáticamente después de dos minutos.
- El irrigador bucal recordará el último modo de presión de agua que utilizó.
- A veces, puede que se escape agua por los laterales del depósito de agua. Esto es normal.

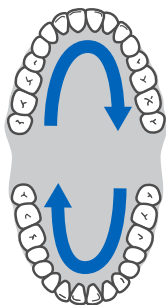



Figura 1.3

Mantenimiento

Cargar la batería

El irrigador bucal viene con una batería de ión-litio recargable. Utilice el cable de carga incluido para cargar el irrigador bucal. El símbolo  se pondrá rojo cuando sea hora de recargar la batería.

1. Inserte el cable de carga USB en el puerto de carga del irrigador bucal (figura 2.1).

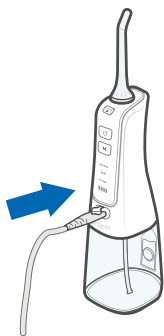







Figura 2.1

2. Conecte el cable de carga USB a un adaptador de CC de 5 V y enchúfelo a una toma eléctrica. También puede enchufar el cable a una toma USB con corriente.
3. La carga puede durar hasta 4 horas. Cuando el irrigador bucal esté totalmente cargado, el símbolo  se pondrá en verde.

Nota:

- **No** utilice el irrigador bucal mientras se carga.
- Para que la batería dure más, recárguela siempre cuando el símbolo  se ponga en rojo.
- El símbolo  indica que la batería del irrigador bucal está totalmente cargada,  indica que está cargada a mitad y  indica que el irrigador bucal se debe recargar.
- El irrigador bucal incluye una batería de litio que no se puede reemplazar. Cuando la batería empiece a fallar, recíclala en su punto local de reciclaje.

Limpiar el irrigador bucal

1. Apague el irrigador bucal.
2. Llene el depósito de agua limpia y deje que salga hasta que se vacíe el depósito.
3. Si es necesario, enjuague el irrigador bucal con agua del grifo.
4. Séquelo con un paño suave.

Limpiar el depósito, el tubo y el filtro de agua


1. Apague el irrigador bucal y gire el depósito de agua a la posición  (figura 3.1).
2. Retire suavemente el tubo del agua y el filtro del irrigador bucal (figura 3.2).
3. Lávelos con agua limpia o límpielos con un cepillo de dientes o un paño suave.
4. También puede quitar el filtro de agua tirando de él suavemente con una uña o con el extremo plano de un palillo (figura 3.3). Limpie el filtro con un cepillo de dientes o un paño suave y enjuáguelo.
5. Seque todas las partes con un paño limpio.



Figura 3.1




Figura 3.2






Figura 3.3

Cambiar la boquilla

Se recomienda cambiar la boquilla cada tres meses. Pulse  y deseche la boquilla antigua antes de cambiarla por una nueva.

Nota: con el fin de mantener el buen rendimiento del irrigador bucal, utilice **solo** boquillas originales de Etekcity. Si desea adquirir boquillas de repuesto, vaya a Amazon y busque **[ASIN]**.

Almacenamiento

1. Apague el irrigador bucal, vacíe el depósito de agua y séquelo.
2. Pulse  y separe la boquilla del irrigador bucal.
3. Gire el depósito de agua de modo que la línea esté en .
4. Coloque la boquilla dentro del depósito de agua y vuelva a girarlo para que encaje en el irrigador y la línea esté en .
5. Guárdelo en un lugar fresco y seco.

Nota:

- Cargue el irrigador bucal por completo antes de guardarlo durante largos periodos de tiempo.
- **No** guardar cerca de productos químicos o gases corrosivos. **No** dejar el irrigador bucal expuesto a disolventes químicos, pelusas o polvo.
- Mantener alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Resolución de problemas

Problema	Posible solución
Sale agua por la zona situada entre la boquilla y el orificio de la boquilla.	Asegúrese de que la boquilla esté colocada correctamente.
	Póngase en contacto con Atención al Cliente (consulte la página 14).
El depósito de agua pierde agua.	Asegúrese de que el depósito de agua esté bien colocado.
El agua sale con poca presión.	Cargue la batería (consulte Cargar la batería , página 9).
	Limpie el irrigador bucal y la boquilla (consulte Limpiar el irrigador bucal , página 9).
	Si la presión está en el modo Soft (suave), aumentela a Normal (normal) (consulte Usar el irrigador bucal , página 7).
	Cambie la boquilla (consulte Cambiar la boquilla , página 11).
El irrigador bucal no se apaga.	Cargue la batería (consulte Cargar la batería , página 9).
No sale agua del irrigador bucal.	Limpie el filtro de agua (consulte Limpiar el depósito de agua, el tubo de agua y el filtro de agua , página 10).
Se escapa agua por los laterales del depósito de agua.	Como el depósito de agua y el cuerpo principal del irrigador bucal no están completamente sellados, es posible que se escape agua por los laterales. Esto es normal.

Si su problema no aparece aquí, póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 13).

Información sobre la garantía

CONDICIONES Y POLÍTICA

Etekcify Corporation garantiza la máxima calidad de todos los productos en cuanto a material, fabricación y servicio durante 2 años desde la fecha de compra hasta el final del periodo de garantía. La duración de la garantía puede variar en función de la categoría del producto.

Si tiene algún problema o preguntas relacionadas con su nuevo producto, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente. ¡Su satisfacción es nuestra prioridad!

Atención al Cliente

Si tiene algún problema o dudas relacionadas con su nuevo producto, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente.

Atención al Cliente

Etekcify Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
EE. UU.

Correo electrónico:
support.eu@etekcity.com

**Antes de ponerse en contacto con Atención al Cliente, tenga a mano su factura y número de pedido.*

Conecte con nosotros @EtekcityEngineering



