


Hydropulseur dentaire sans fil

Modèle: EWF-32

Notice d'utilisation

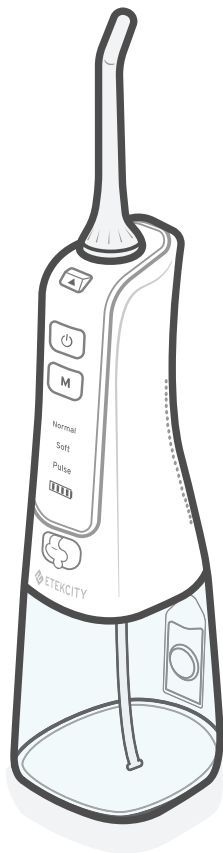

Merci d'avoir acheté cet
hydropulseur dentaire sans fil
d'Etekcity.

Si vous avez des questions ou des
préoccupations, veuillez contacter
notre service client à l'adresse
support.eu@etekcity.com.

Nous espérons que votre nouvel
hydropulseur dentaire vous plaira !

Table des matières

Contenu de l'emballage	4
Caractéristiques techniques	4
Consignes de sécurité importantes	5
Schéma des fonctions	7
Commandes	8
Utilisation de votre hydropulseur dentaire	8
Entretien	10
• Chargement de la batterie	10
• Nettoyage de l'hydropulseur dentaire	10
• Nettoyage du réservoir d'eau, du flexible à eau et du filtre à eau	11
• Remplacement de l'embout jet	12
• Stockage	12
Dépannage	13
Informations relatives à la garantie	14
Service client	14

Contenu de l'emballage

- 1 hydropulseur dentaire sans fil
- 1 réservoir d'eau (préinstallé)
- 4 embouts jets standards
- 1 câble de recharge
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Entrée	USB 5 V, 1 A
Type de batterie	Batterie Li-ion 1400 mAh
Durée de recharge	4 heures
Capacité du réservoir d'eau	300 ml / 10,1 oz
Débit d'eau	1400 à 1800 jets/min
Pression de l'eau	276 à 724 kPa / 40 à 105 psi
Dimensions	7,3 x 8,2 x 30,2 cm / 2,9 x 3,2 x 11,9 po
Poids	0,3 kg / 0,7 lb
Extinction automatique	2 minutes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence d'enfants, ces précautions de sécurité de base doivent **toujours** être suivies :

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

DANGER : pour réduire le risque d'électrocution lors de la charge :

- **Ne manipulez pas** le câble de recharge avec les mains mouillées.
- **N'immergez pas** et ne laissez pas tomber le câble de recharge ou l'hydropulseur dentaire dans de l'eau ou tout autre liquide lorsque l'appareil est en charge.
- **N'utilisez pas** l'appareil lorsque vous prenez un bain.
- **Ne placez pas** et n'entreposez pas l'hydropulseur dentaire dans un endroit où celui-ci pourrait tomber dans une baignoire, une douche ou un lavabo.
- **Ne touchez pas** l'hydropulseur dentaire s'il est tombé dans de l'eau. Débranchez immédiatement le câble de recharge du secteur s'il est branché.
- Vérifiez que le câble de recharge n'est pas endommagé avant de l'utiliser. N'utilisez **jamais** un câble de recharge endommagé pour charger l'hydropulseur dentaire.

AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures physiques :


- **Ne branchez pas** le câble de recharge à un système de tension différent de celui spécifié dans la section **Caractéristiques techniques** (voir page 4).
- **N'utilisez pas** cet hydropulseur dentaire si son cordon ou sa fiche sont endommagés, ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement. Contactez le **service client** (voir page 14).
- **Ne visez pas** le jet d'eau sous la langue, dans l'oreille, le nez ou d'autres zones délicates. Cet hydropulseur dentaire est capable de produire des pressions pouvant causer de graves dommages dans ces zones.

- Utilisez l'hydropulseur dentaire **uniquement** selon ces instructions et les recommandations de votre dentiste.
- Selon l'état de santé de vos gencives, celles-ci peuvent saigner lors de la première utilisation de l'hydropulseur dentaire. Ce phénomène normal peut survenir lors de tous les types de nettoyages dentaires. En cas de saignement excessif ou continu après 2 semaines, consultez un dentiste.
- Remplissez le réservoir d'eau **uniquement** avec de l'eau ou toute autre solution recommandée par votre dentiste.
- **Ne laissez pas tomber** et n'insérez pas d'objet étranger dans l'ouverture de l'hydropulseur dentaire.
- Tenez le câble de recharge et l'hydropulseur dentaire à distance des surfaces chauffées.
- **N'utilisez pas** l'appareil dans des endroits où de l'oxygène ou des aérosols sont utilisés.
- **N'utilisez pas** de bain de bouche ou de rince-bouche contenant de l'iode, de la javel ou des huiles essentielles avec cet hydropulseur dentaire.
- **N'utilisez pas** l'hydropulseur dentaire lorsque vous portez des bijoux buccaux. Ôtez-les avant d'utiliser l'appareil.
- **N'utilisez pas** l'appareil si vous avez une plaie ouverte sur la langue ou dans la bouche.
- Si votre médecin vous a conseillé d'utiliser une prémédication antibiotique avant les procédures dentaires, vous devriez consulter votre dentiste avant d'utiliser l'hydropulseur dentaire ou tout autre outil d'hygiène buccale.
- Surveillez de près l'hydropulseur dentaire si celui-ci est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées.
- **Ne laissez pas** les enfants jouer avec l'hydropulseur dentaire.
- Utilisez **uniquement** le câble de recharge fourni pour charger la batterie.
- Cet hydropulseur dentaire est équipé d'une batterie ne pouvant pas être remplacée.
- Non adapté à un usage commercial. Pour un usage domestique **seulement**.


CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Schéma des fonctions

- A. Embout jet
- B. Port de l'embout jet
- C. Bouton de libération de l'embout
- D. Touche de marche/arrêt
- E. Touche de sélection du mode
- F. Normal (Normal)
- G. Soft
- H. Pulse (Impulsion)
- I. Indicateur de niveau de batterie
- J. Cache du port
- K. Port de recharge
- L. Picots antidérapants
- M. Filtre à eau
- N. Flexible à eau
- O. Câble de recharge
- P. Réservoir d'eau
- Q. Couvercle du réservoir d'eau

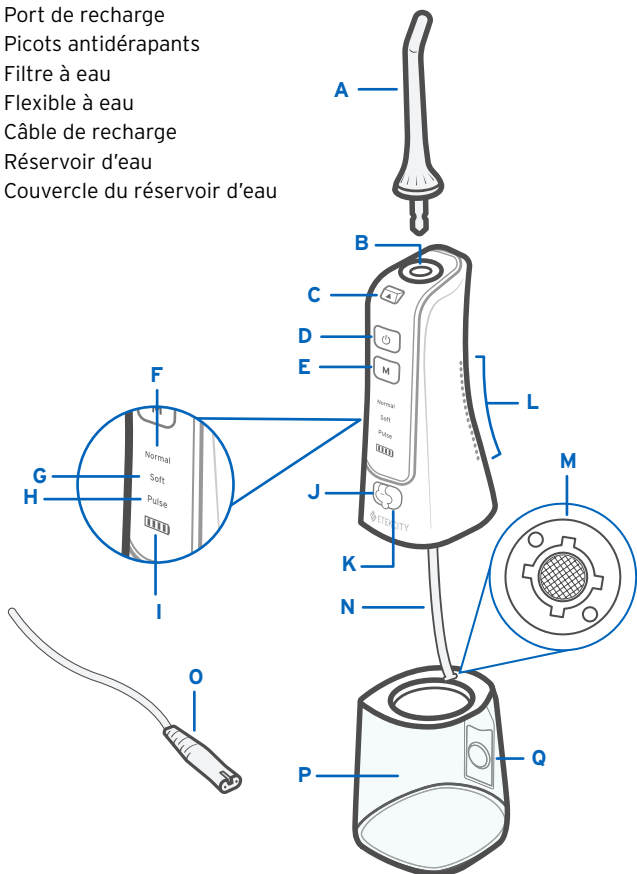

Commandes

 : Libère l'embout jet de l'hydropulseur dentaire.

 : Pour allumer ou éteindre l'hydropulseur dentaire.

M : Pour faire défiler les modes « Normal » (Normal), « Soft » (Faible) et « Pulse » (Impulsion). Vous pouvez changer de mode à tout moment, même lorsque l'hydropulseur dentaire est éteint.



Utilisation de votre hydropulseur dentaire

Remarque :

- *Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, rechargez complètement l'hydropulseur dentaire (voir la section **Chargement de la batterie**, page 10).*
- *Utilisez le mode « Soft » (Faible) pendant les 2 premières semaines pour laisser aux gencives le temps de s'habituer à l'hydropulseur dentaire. En cas de saignement continu après 2 semaines, consultez un dentiste.*

1. Insérez l'embout jet fermement dans son port. Vous entendrez l'embout se clipser en place.
2. Assurez-vous que l'hydropulseur dentaire est éteint et que le cache du port couvre le port de recharge. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et remplissez-le d'eau du robinet. Appuyez fermement sur le couvercle pour le fermer.
3. Appuyez sur la touche **M** pour sélectionner le mode de pression de l'eau.

Utilisation de votre hydropulseur dentaire (suite)

- Dirigez l'embout jet vers les gencives au-dessus de vos dents du fond et fermez légèrement la bouche pour éviter les éclaboussures d'eau. Penchez-vous au-dessus d'un évier et maintenez la touche  enfoncée pendant 1 seconde pour allumer l'hydropulseur dentaire [Figure 1.1]. Laissez l'eau s'écouler dans l'évier.
- Dirigez le jet d'eau le long de l'extérieur de vos gencives. Maintenez le jet entre les dents pour éliminer le tartre ou les particules de nourriture [Figure 1.2].
- Répétez l'opération le long de l'intérieur des gencives jusqu'à ce que toutes les dents aient été complètement nettoyées [Figure 1.3].
- Appuyez sur la touche  pour éteindre l'hydropulseur dentaire.

Remarque :

- L'embout jet peut être tourné à 360° afin d'ajuster la direction du débit d'eau.
- Vous pouvez basculer entre les 3 modes de pression de l'eau à tout moment.
- L'hydropulseur dentaire s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes.
- L'hydropulseur dentaire mémorise la dernière pression de l'eau utilisée.
- De l'eau peut parfois couler des côtés du réservoir d'eau. Ce phénomène est normal.

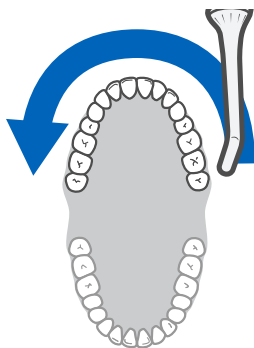


Figure 1.1

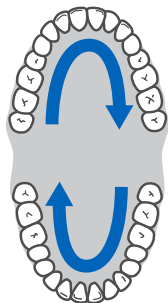


Figure 1.3

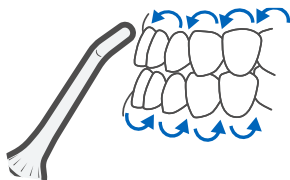


Figure 1.2

Entretien

Chargement de la batterie

L'hydropulseur dentaire est livré avec une batterie Li-ion rechargeable intégrée. Utilisez le câble de chargement fourni pour recharger l'hydropulseur dentaire. Le témoin **|||||** devient rouge lorsque la batterie doit être chargée.

1. Insérez le câble de recharge USB dans le port de recharge de l'hydropulseur dentaire [Figure 2.1].

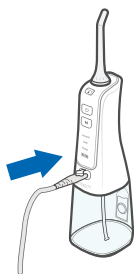


Figure 2.1

2. Branchez le câble de recharge USB sur un adaptateur 5 V c.c. et branchez-le au secteur. Vous pouvez également brancher le câble sur une prise d'alimentation USB.
3. Le temps de charge peut aller jusqu'à 4 heures. L'hydropulseur dentaire est complètement chargé lorsque le témoin **|||||** devient vert.

Remarque :

- **N'utilisez pas** l'hydropulseur dentaire pendant le chargement.
- Pour maximiser la durée de vie de la batterie, rechargez-la à chaque fois que le témoin **|||||** devient rouge.
- **|||||** indique que la batterie de l'hydropulseur dentaire est complètement chargée, **|||||** indique que sa batterie est à moitié chargée et **|||||** indique que l'hydropulseur dentaire doit être rechargé.
- L'hydropulseur dentaire est équipé d'une batterie au lithium ne pouvant pas être remplacée. À la fin de sa durée de vie, veuillez la recycler dans votre centre de tri local.

Nettoyage de l'hydropulseur dentaire

1. Éteignez l'hydropulseur dentaire.
2. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau claire et laissez l'appareil en marche jusqu'à ce que le réservoir se vide.
3. Si nécessaire, rincez l'hydropulseur dentaire à l'eau claire et courante.
4. Séchez-le à l'aide d'un chiffon doux.

Nettoyage du réservoir d'eau, du flexible à eau et du filtre à eau


1. Éteignez l'hydropulseur dentaire et tournez le réservoir d'eau sur la position  [Figure 3.1].
2. Retirez doucement le flexible d'eau et le filtre de l'hydropulseur dentaire [Figure 3.2].
3. Rincez à l'eau claire ou nettoyez à l'aide d'une brosse à dents ou d'un chiffon doux.
4. Alternativement, vous pouvez ôter le filtre à eau en le tirant doucement avec l'ongle ou le bout plat d'un cure-dent [Figure 3.3]. Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse à dents ou d'un chiffon doux puis rincez-le.
5. Séchez soigneusement toutes les pièces à l'aide d'un chiffon propre.



Figure 3.1




Figure 3.2



Figure 3.3




Remplacement de l'embout jet

Nous vous recommandons de remplacer l'embout jet tous les 3 mois. Appuyez sur la touche

 et jetez l'embout jet usé avant de le remplacer par un nouvel embout jet.

Remarque : *pour préserver les performances de votre hydropulseur dentaire, utilisez **uniquement** les embouts jets de la marque Etekcity. Pour acheter des filtres de rechange, rendez-vous sur Amazon et cherchez la référence [ASIN].*

Stockage

1. Éteignez l'hydropulseur dentaire et videz le réservoir d'eau. Essuyez-le pour le sécher.
2. Appuyez sur la touche  et ôtez l'embout jet de l'hydropulseur dentaire.
3. Vissez le réservoir d'eau avec la ligne sur .
4. Placez l'embout jet dans le réservoir d'eau et revissez-le sur l'hydropulseur dentaire avec la ligne sur .
5. Entrez-le au frais et au sec.

Remarque :

- *Chargez complètement l'hydropulseur dentaire avant de l'entreposer pour une période prolongée.*
- **Ne rangez pas** le tensiomètre à proximité de produits chimiques ou de gaz corrosifs. **Ne laissez pas** l'hydropulseur dentaire exposé à un solvant chimique ou à de la poussière.
- *Placez-le à distance des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.*

Dépannage

Problème	Solution possible
De l'eau s'écoule de la zone entre l'embout jet et son port.	Assurez-vous que l'embout jet est correctement monté.
	Contactez le service client (voir page 14).
De l'eau s'écoule de l'hydropulseur dentaire.	Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien en place.
La pression de l'eau est trop faible.	Chargez la batterie (voir la section Chargement de la batterie , page 10).
	Nettoyez l'hydropulseur dentaire et l'embout jet (voir la section Nettoyage de l'hydropulseur dentaire , page 10).
	Si la pression est réglée sur « Soft » (Faible), augmentez la pression de l'eau à « Normal » (Normal) (voir la section Utilisation de votre hydropulseur dentaire , page 8).
	Remplacez l'embout jet (voir la section Remplacement de l'embout jet , page 12).
L'hydropulseur dentaire ne s'allume pas.	Chargez la batterie (voir la section Chargement de la batterie , page 10).
L'hydropulseur dentaire n'émet pas de jet d'eau.	Nettoyage du filtre à eau (voir la section Nettoyage du réservoir d'eau, du flexible à eau et du filtre à eau , page 11).
De l'eau coule des côtés du réservoir d'eau.	Le réservoir d'eau et le corps de l'hydropulseur dentaire n'étant pas complètement scellés, de l'eau peut s'écouler des côtés. Ce phénomène est normal.

Si votre problème n'est pas repris dans la liste, contactez le **service client** (voir page 14).

Informations relatives à la garantie

CONDITIONS GÉNÉRALES ET POLITIQUE

Etekcity Corporation garantit la plus haute qualité des matériaux, de la main-d'œuvre et du service associés à tous ses produits, pendant 2 ans à partir de la date d'achat. La durée de garantie est susceptible de varier selon la catégorie de produit.

En cas de problème ou de question concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à contacter notre service client. Votre satisfaction est notre priorité !

Service client

En cas de problème ou de question concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à contacter notre service client qui vous viendra en aide.

Service client

Etekcity Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
États-Unis

E-mail: support.eu@etekcity.com

**Munissez-vous de votre facture et de votre numéro de commande avant de contacter notre service client.*

Rejoignez-nous sur @EtekcityFrance



